

Mini-Faszienpistole




Gebrauchsanweisung

Übersicht des Produkts



Griff

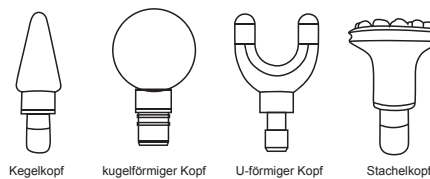

Geeignet für die Massage des tiefen Gewebes, der plantaren Akupunkturpunkte wie z. B. der Meridiangelenke, etc. Geeignet für die Massage aller Muskelpartien wie die Fußsohle oder des Halses und der Halswirbelsäule sowie der Achillessehne und anderer tiefen Stimulation.

Anwendung

Öffnen/Verbinden (Tastentyp)
 -Drücken Sie die Starttaste drei Sekunden lang.
 -Zum Ausschalten die Starttaste drei Sekunden lang drücken.
Anstrengungen zur Regulierung
 -Der Startgang ist der erste Gang.
 -Klicken Sie einmal auf die Starttaste, um einen Gang hinzuzufügen.
 -Der höchste Gang ist der sechste Gang.
 Drücken Sie die Starttaste einmal, um in den ersten Gang zu schalten.




Einschalten/Ausschalten (digital touch)
 -Drücken Sie die "+/-"-Taste drei Sekunden lang, um das Gerät zu starten.
 -Zum Ausschalten die "+/-"-Taste drei Sekunden lang drücken
Anstrengungen zur Regulierung
 -Mit der Ausgangsstufe 0 einschalten.
 -Drücken Sie die Taste, um die Stärke einzustellen
 -Max. 32 Gänge




Hinweis: Um die Knochen und Muskeln zu schützen, vermeiden Sie eine langfristige Fixpunktmassage. Der intelligente Schutzmodus stoppt automatisch nach 15 Minuten der Beanspruchung und schaltet sich ab.

Austauschen des Massagekopfes

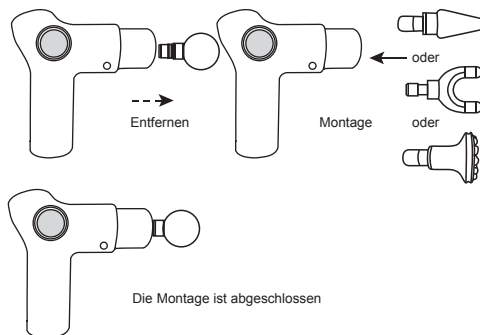

Die Ladung

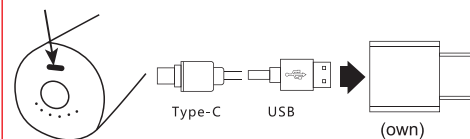

Hinweis: Input liegt bei 5V-2A für den Handy-Ladekopf

1. Ein-/Ausschalttaste (langes Drücken zum Einschalten/langes Drücken zum Ausschalten)
 2. Drücken Sie die offene Taste, um die Gänge zu wechseln.
 3. Der Massagekopf kann auseinandergebaut werden und er ist austauschbar.
 4. Bitte verwenden Sie ein 5V-Ladegerät zum Aufladen
 5. Bitte laden Sie das Gerät beim ersten Mal drei Stunden lang auf. Bitte verbinden Sie die 5V-Stromversorgungsleitung mit dem Datenkabel zum Aufladen
- Tastenmodell: 6 Lichter leuchten beim Laden
 Touch-Modell: Wenn das Produkt aufgeladen ist, zeigt der Bildschirm die Strommenge an und die Zahl blinkt. Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, zeigt der Bildschirm „99“ an.



Einsatzgebiete

- Schmerzen und Krämpfe bei Muskelprellungen, Verstauchungen, Zerrungen
- Unterstützt den Transport der Ödemflüssigkeit in den geschwollenen Bereich
- Lockert und verdickt Bindegewebe und Faszien
- Verringert die Ansammlung von Milchsäure in den Muskeln
- Vergrößerung des Bewegungsumfanges
- Vermeidung von Muskelermüdung

Nicht anwenden bei:

- Aneurysmen, Blutungen, Einnahme von Blutverdünnern
- Herzkrankheit, Herzschrittmacher oder Defibrillator
- Schwangerschaft, Krebs
- Das Gerät sollte nicht innerhalb von 8 cm von der internen Fixierung verwendet werden
- für bis zu 90 Tage
- Empfindliche Bereiche: Kopf, Gesicht, Halswirbel, Rückenwirbel
- Schienbein, Fußrücken, Handrücken usw., wo die Muskelabdeckung in Knochennähe geringer ist

Inhalt

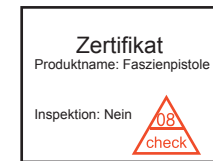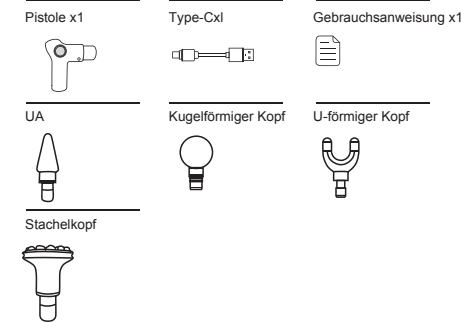

Produktname: Mini-Faszienpistole
 Nennspannung: 7,4 V
 Motorleistung: 30 W
 Schnittstellentyp: Typ-C
 UMDREHUNGEN PRO MINUTE: 1800-3200 U/MIN
 Gangposition: 6-Stufen-Einstellung (Knopf-Typ) Gangposition: 32-Stufen-Einstellung (Touch-Typ) Anzahl der Massageknöpfe: 4
 Material: elektronischeKomponenten +ABS-Kunststoff-Nettogewicht: 0,46 kg
 Produktgröße: 142x56x140mm

Garantiekarte

Produktmodell _____

Seriennummer _____

Kaufdatum _____

Name des/der Kund:in _____

Telefonnummer des/der Kund:in _____

E-Mail des/der Kund:in _____

Garantiebestimmungen:

- (1) Die Garantie für dieses Produkt beträgt ein Jahr, und für den eingebauten Akku gilt eine Garantie von sechs Monaten. (2) Die Garantie beginnt mit dem ersten Kaufdatum.
 - (2) Wenn es ein Qualitätsproblem gibt, das eine Garantie erfordert, senden Sie bitte diese Garantiekarte mit.
- Schicken Sie sie zusammen mit dem Gerät an den/die Händler:in oder den technischen Reparaturdienst zurück.
 Die folgenden Bestimmungen sind nicht von der Garantie abgedeckt:
 (1) Die Garantiekarte, die nicht den formalen Kaufbeleg weiterleiten und die detaillierten Informationen nicht ausfüllen kann.
 (2) Schäden, die durch Faktoren, die als unaufhaltsam gelten.
 (3) Es wird angenommen, dass die Zerlegung der Pistole Shanghai vorbehalten ist.
 Das Unternehmen behält sich das Recht auf die endgültige Auslegung der obengenannten Klauseln und Einschränkungen nach dem Kauf vor.



Hergestellt in China