

5 WARTUNG

- Wischen Sie das Gerät nach jeder Verwendung mit einem trockenen Tuch ab. Nicht abwaschen, das Produkt ist nicht wasserfest.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Abwischen aus.
- Ziehen Sie das Gerät nach der Verwendung immer aus der Steckdose und zerlegen Sie das Produkt nicht.

LAGERUNG


- Lagern Sie dieses Produkt an einem kühlen und trockenen Ort, um Feuchtigkeit und direktes Sonnenlicht zu vermeiden. Alternativ können Sie es in der Verpackung aufbewahren.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

FEHLERSUCHE

Das Licht ist nicht sehr hell	Das Gerät aufladen
Kann nicht aufgeladen werden	Wechseln Sie den Stecker/usb
Das Licht blinkt	Das Gerät aufladen
Andere	Kontakt Verkäufer

6 SPEZIFIKATIONEN

Produkt Name:	
Größe des Produkts	195*165*125mm
Produkt Gewicht	76g
Materialien	ABS
Ausgangsspannung	5V / 1A
Zubehör	Maske, Manuell, Kabelleitung
Stromversorgung	Wiederaufladbare Batterie
Aufladezeit	2 Stunden

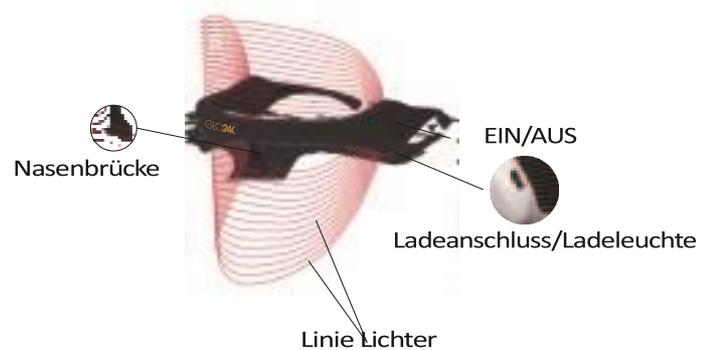

PRODUKTAUFTRITT

GLO24K
UNLEASH THE POWER OF GOLD

7 Farbe LED Schönheit Maske



1

Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung sorgfältig durch

GLO24K

4 UNLEASH THE POWER OF GOLD

7 Farbe LED Schönheit Maske



TO MAXIMIZE RESULTS SCAN HERE

For more information about the device please visit
WWW.GLO24K.COM
Dist. by Y&E Ent., LLC
Atlanta, GA 30338 USA
71-75 Shelton Street, London, UK

PRODUKTVORTEILE 3

Dieses Produkt verwendet 7 Arten von Lichtquellen, darunter ROT, BLAU, GRÜN, GELB, LILA, KLEINBLAU und LASER-Farben. Hilft bei der Reduzierung von Falten, feinen Linien und Altersflecken. Hilft, die Haut ins Gleichgewicht zu bringen. Verbessert die Haut Reinigt die Haut und bekämpft Akne. Strafft die Haut für einen strahlenden Teint. Beschleunigt die Blutzirkulation. Verbessert die Flexibilität und Elastizität der Haut.

FUNKTIONEN

Rotes Licht S (650-730nm)	Verringert das Erscheinungsbild von feinen Linien und Falten, Anti-Aging.
Blaues Licht (525-550nm)	Bekämpft Akne/Anti-Entzündlich.
Grünes Licht (430-450nm)	Reduziert und verhindert Flecken, beruhigend und reinigend.
Gelbes Licht (565-570nm)	Verbessert Hautzustände, Hautrötungen und Pigmentierung
Violettes Licht (380-440nm)	Bekämpft Akne/ Narben/ Flecken, minimiert Poren
Klar Blau (160-195nm)	Gleicht den Hautton aus, beschleunigt die Blutzirkulation.
Laserlicht (weiches Licht)	Dringt tief in die Haut ein, beschleunigt den aktiven Gewebestoffwechsel

2 RICHTLINIEN

Reinigen Sie Ihr Gesicht. Tragen Sie Ihre bevorzugten Hautpflegeprodukte auf (vorzugsweise GLO24K).

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten.

Klicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um das gewünschte LED-Licht auszuwählen.

Legen Sie die Maske für 10 Minuten auf das Gesicht.

Zum Ausschalten drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang.

※ Bei Bedarf verwenden (Automatische Zeitschaltung ist auf 10 Minuten pro Anwendung eingestellt).

※ Verwenden Sie das Gerät NICHT während des Ladens.

ANMERKUNGEN

1. Dieses Produkt wird nur zur Verwendung durch Erwachsene empfohlen.
2. Die Maske ist so konzipiert, dass sie das Licht gleichmäßig auf dem Gesicht verteilt, ohne Nebenwirkungen.
3. Der lineare Bereich ist nur der Lichtleiter und nicht die eigentliche Lichtquelle, was die Raffinesse des Produkts ausmacht.
4. Der Schaltkreis im Inneren des Geräts darf nicht gedrückt oder gefaltet werden und sollte flach abgelegt werden, um das Produkt nach dem täglichen Gebrauch zu schützen.
5. Im Falle von Empfindlichkeit verwenden Sie das Produkt bitte mit geschlossenen Augen.
6. Die Verwendung der Maske nach dem Auftragen von Hautpflegeprodukten (vorzugsweise GLO24K) verbessert die Ergebnisse.

- | | | |
|--|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">7. Bei Bedarf verwenden. Jede Anwendung bis zu 10 Minuten.8. Im seltenen Fall von Unbehagen, beenden Sie die Verwendung des Geräts und kontaktieren Sie den Verkäufer.9. Während des Ladens zeigt eine rote Leuchte neben dem Ladeanschluss an, dass die Maske geladen wird. Wenn das rote Licht ausgeschaltet |
|--|--|--|