


GLO24K 6-in-1-
Schönheitstherapie-Stab für
Gesicht, Augen und Hals mit Dual-
LED-, Thermo-, Vibrations- und
Mikrostromtechnologien Artikel-Nr.:
BD5

GEBRAUCHSANWEISUNG

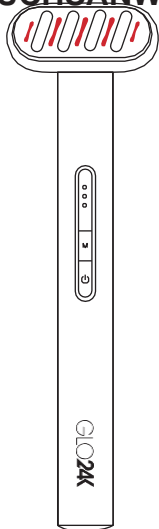

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch
sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren
Nachschlagen gut auf.

—1—

Danke für Ihren Einkauf

Produktbeschreibung

Hauptfunktionen :

Rotlichttherapie
Die Rote LED-Lichttherapie mit Wellenlängen von 600-650 nm kann die Blutzirkulation anregen und Anti-Aging Effekte bewirken.

Blaulichttherapie
Die Blaulichttherapie mit Wellenlängen von 450-500 nm hilft bei zahlreichen Hauterkrankungen und unterstützt die Entgiftung und Verbesserung der Haut.

Mikrostromtechnologie
Nutzt schwachen Strom, um Muskeln und Hautzellen zu stimulieren, erhöht die Beweglichkeit und Flexibilität, fördert die Blutzirkulation, erhöht die Elastizität der Haut und hat einen sichtbaren Effekt der Hautstraffung.

Thermotherapie
Der Massagekopf erwärmt sich automatisch und schonend. Dies kann helfen, die Blutzirkulation zu beschleunigen und die Vitalität der Haut zu verbessern.

—2—

90° drehbarer Massagekopf
Innovativer drehbarer und verstellbarer Massagekopf mit bis zu 90° (T-Form) Neigungsdesign. Praktisch zum Gleiten und Massieren der Stirn, der Augenpartie, der Wangen, des Kiefers, des Halses und verschiedener Gesichtspartien.


Einstellbare Vibration mit 3 Gängen
Eingebauter, einstellbarer Hochfrequenz-Vibrations- und Massagegenerator mit 3 Gängen: niedrig/mittel/hoch, um die Haut zu stimulieren und sie straff und strahlend aussehen zu lassen.

Produktmerkmale



—3—

Darstellung

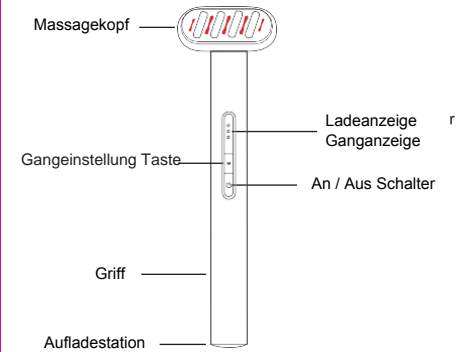

Verwendung

1. Tragen Sie ein Gesichts- oder Augenserum auf (vorzugsweise GLO24K), bis es vollständig eingezogen ist. (Dieser Schritt ist nicht zwingend erforderlich, wird aber empfohlen, um optimale Ergebnisse zu erzielen).
2. Einschalten: Ein langer Druck auf die untere ON/OFF-Taste schaltet den Stab mit Licht-, Mikrostrom-, Wärme- und Vibrationsfunktionen ein, die alle auf ON eingestellt sind.
3. Schieben Sie den Massagekopf vorsichtig über die betroffenen Bereiche (Gesicht, Hals und um die Augen herum).
4. Sie können den Massagekopf im Uhrzeigersinn bis zu 90° drehen und verstellen,

5. Um von rotem auf blaues Licht umzuschalten, drücken Sie kurz auf die ON/OFF-Taste, während das Gerät eingeschaltet ist. Sie können während der Anwendung jederzeit zwischen den Lichtern wechseln.
6. Klicken Sie auf die obere Taste für die Zahnradeneinstellung, um die Intensität der Vibration und des Mikrostroms zu ändern. Diese ändern sich gemeinsam (niedrig/mittel/hoch) und werden durch die Lichter 1/2/3 angezeigt.
7. Genießen Sie 5-10 Minuten therapeutische Entspannungsmassage.
8. Herunterfahren: Drücken Sie lange auf die ON/OFF-Taste, um sie auszuschalten.
9. Wischen Sie den Massagekopf nach Gebrauch mit einem sauberen Tuch ab. (Nicht mit Wasser abspülen, da es nicht wasserdicht ist)
10. HINWEIS: Wenn Sie nach dem Einschalten 5 Minuten lang keine Tastenbetätigung ausführen, schaltet sich das Produkt automatisch ab. Schalten Sie es wieder ein, um den Betrieb fortzusetzen.

Ladeanleitung

1. Stecken Sie das Lade-USB-Kabel in ein Ausgangs-USB-Ladegerät (Ladequelle) und stecken Sie das Ladekabelende zum Aufladen in den Ladeanschluss an der Unterseite dieses Produkts. Das Produkt muss für einen ordnungsgemäßen Ladevorgang AUSGESCHALTET sein und darf während des Ladevorgangs NICHT eingeschaltet werden. Das Ladegerät wurde entwickelt, um dieses Produkt aufzuladen, während es NICHT vollständig in den Ladeanschluss gelangt.
2. Wenn die Kontrollleuchte blinkt (langsam Blinken), befindet sie sich in einem Ladezustand.
3. Wenn die Kontrollleuchte konstant leuchtet und nicht mehr blinkt, bedeutet dies, dass die Stromversorgung voll ist.
4. Wenn die Kontrollleuchte mehrmals hintereinander blinkt, signalisiert dies eine geringe Leistung. Bitte laden Sie das Produkt zwischen den Anwendungen ordnungsgemäß auf, da es sonst plötzlich nicht mehr funktioniert.
6. Betreiben Sie dieses Produkt nicht, während es aufgeladen wird. Zum Einschalten trennen Sie die Verbindung zum Ladegerät.

HINWEIS: Das Ladegerät geht NICHT vollständig in den Ladeanschluss, um dieses Produkt aufzuladen.

Warnung

1. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht oder wasserbeständig. Spülen oder waschen Sie es nicht mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit. Halten Sie dieses Produkt sauber und trocken.
2. Achten Sie darauf, das Produkt zwischen den Anwendungen aufzuladen, und laden Sie es mindestens alle 2 Monate bis zur vollen Kapazität auf, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
3. Während der Benutzung des Geräts kann der Massagekopf nur gegen den Uhrzeigersinn gedreht und eingestellt werden; der maximale Drehbereich beträgt 90°. Die Rückwärtsdrehung gilt nach Gebrauch (im Uhrzeigersinn).

Bitte beachten

1. Wenn Sie eine Hautkrankheit, Probleme oder eine sehr empfindliche Haut haben, fragen Sie bitte vor der Anwendung einen Dermatologen.
2. Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, probieren Sie es bitte auf Ihrer Haut am Arm aus, um keine Empfindlichkeiten sicherzustellen.
3. Sollten Sie während oder nach der Anwendung dieses Produkts Beschwerden haben, stellen Sie die Anwendung sofort ein und wenden Sie sich an den Hersteller.
4. Bitte teilen Sie dieses Produkt aus hygienischen Gründen nicht mit anderen.
5. Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.
6. Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien, um das Produkt abzuwischen.
7. Bitte zerlegen Sie dieses Produkt nicht.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktmaterial	Metall + PC Kunststoff
Batteriekapazität	350 mAh
Eingangsspannung	5V
Ladezeit	2H
Produktgröße	158*59,5*21,8mm
Nettogewicht	40g
Leistung	<3W

Garantiebestimmungen

GLO24K bietet eine eingeschränkte Standardgarantie auf seine Schönheitswerkzeuge, Massagegeräte und Zauberstäbe (weitere Informationen finden Sie auf der Website).

—7—

GLO24K
UNLEASH THE POWER OF GOLD



UM DEN ERGEBNIS ZU MAXIMIEREN, SCANEN SIE HIER.
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter

WWW.GLO24K.COM

Dist. by Y&E Ent., LLC
Atlanta, GA 30338 USA
71-75 Shelton Street, London, UK Hauptstraße
22 Neugersdorf 02727, Deutschland

—8—